


# QUICKGUIDE™

## DECAPUS® III

1

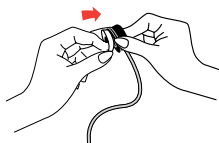

### MONTAGE

Vérifier la présence d'électrodes Quickels sur tous les modules de signal.

3



### PROCÉDER À LA MESURE

Fixer les électrodes Quickels sur le patient en appuyant légèrement sur le dessus du module de signal (cela ouvre le clapet interne du module et provoque la création du vide).

2



### PRÉPARER LE SYSTÈME


Pulvérise du **sérum physiologique** sur la peau du patient ou utiliser une compresse généreusement humidifiée.

La pompe à aspiration démarre quand vous sélectionner la dépression souhaitée avec les boutons 1 à 4 sur le module patient.



1 : Aspiration faible ; 4 : Aspiration forte.

4

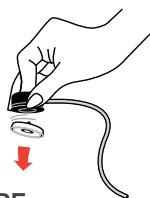

### APRÈS LA MESURE

Bouton marche/arrêt pour arrêter la pompe d'aspiration afin de libérer les électrodes après la mesure.



Remplacer les électrodes Quickels au moins une fois par jour, au moins tous les dix patients, pour conserver une bonne qualité de signal.




Le système est protégé contre la défibrillation.

Vous trouverez le dernier manuel d'utilisation paru sur le site [www.quickels.com](http://www.quickels.com)

Quickels Systems AB, Björnnäsvägen 21, SE-114 19 Stockholm, SUÈDE | [www.quickels.com](http://www.quickels.com)

## PANNEAU DE COMMANDE

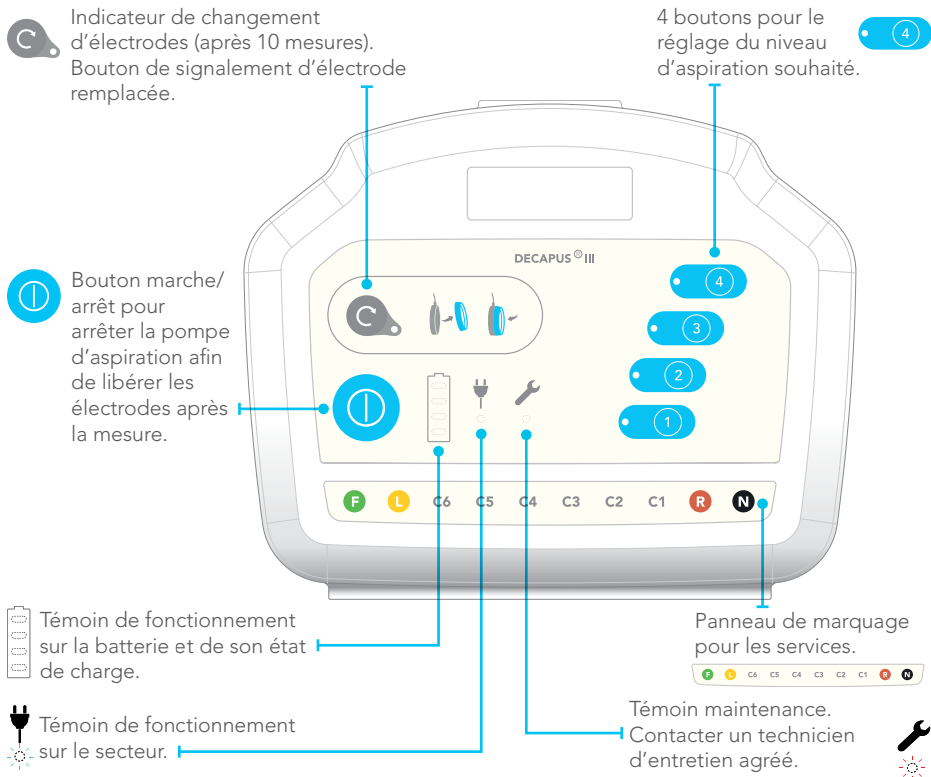

## NETTOYAGE

Couper le courant en tirant la fiche de la prise murale.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil, ainsi que les fils côté patient, avec un chiffon humecté avec un détergent doux et de l'eau. Procéder en cas de besoin à une désinfection de surface.
- Essuyer soigneusement l'appareil avec un chiffon ou du papier essuie-main après le nettoyage.
- Sécher ensuite.

**AUCUN ÉLÉMENT DU SYSTÈME NE DOIT ÊTRE PLONGÉ DANS UN LIQUIDE OU DÉSINFECTÉ INTÉGRALEMENT.**

 Le système est protégé contre la défibrillation.

Vous trouverez le dernier manuel d'utilisation paru sur le site [www.quickels.com](http://www.quickels.com)

Quickels Systems AB, Björnåsvägen 21, SE-114 19 Stockholm, SUÈDE | [www.quickels.com](http://www.quickels.com)